

Peeling kawitacyjny inFace

Zalety stosowania oczyszczania kawitacyjnego:

- bezboleśnie, szybko i dokładnie czyści skórę twarzy, szyi i dekoltu
- dezynfekuje obszar poddany zabiegowi, zapobiegając pojawianiu się stanów zapalnych
- nie wymaga rozgrzewania dlatego można go bezpiecznie wykonywać przy skórach naczyńiowych i wrażliwych
- wspomaga leczenie trądziku
- rozjaśnia przebarwienia i plamy pigmentacyjne
- przygotowuje skórę do dalszych zabiegów kosmetycznych, zwiększając jej możliwości absorbcyjne



GLEBOKIE OCZYSZCZENIE

Z pomocą ultradźwięków emitowanych przez urządzenie do peelingu kawitacyjnego, na zmęczonej twarzy ponownie zagości uśmiech. Łagodne drgania bezboleśnie usuną szorstki naskórek czy zanieczyszczenia z porów, przywracając cerze zachwycający wygląd. Wszystko to z dala od podrażnień.

PIELĘGNACJA NA 4 SPOSOBY

Natychmiastowe wygładzenie to dopiero początek - korzystając z programów InFace MS7100P do peelingu, masażu EMS Pulse oraz pielęgnacji jonami rozjaśnisz też plamy czy cienie, zatrzymasz zmiany trądzikowe i pobudzisz produkcję kolagenu, aby skóra pozostała jędrna mimo upływu lat.

LEPSZE WCHŁANIANIE KOSMETYKÓW

To urządzenie możesz stosować wraz z ulubionymi kosmetykami. Po zabiegu dobroczynne składniki preparatów szybciej wnikną w głąb skóry. Peeling pozwoli otworzyć pory, zapewni lepsze wchłanianie serum oraz kremów, w efekcie Twoja skóra będzie lepiej odżywiona.

Instrukcja obsługi

Oczyszczanie

Tryb oczyszczania ultradźwiękowego - PEELING (stosować ze środkiem do mycia twarzy)

1. Zwilż twarz ciepłą wodą i użyj pianki do mycia twarzy / płynu do mycia twarzy
2. Naciśnij długo przycisk do zasilania aby włączyć, domyślnie jest to tryb PEELING.
3. Urządzenie trzymaj tak aby końcówka była blisko skóry, przesuwaj powoli przez



Głębokie oczyszczanie Tryb ION +

(używać z tonikiem / balsamem)

około 3 min.

1. Nałóż odpowiedni balsam na twarz.
2. Naciśnij krótko przycisk, aby wybrać tryb ION +
3. Urządzenie trzymaj tak aby końcówka była blisko skóry, przesuwaj powoli przez około 3 min. Następnie spłucz twarz ciepłą wodą.



Tryb ION-

(stosować z emulsją/maską)

- 1.Zastosuj odpowiednią esencję /emulsję do twarzy.
- 2.Wybierz Tryb ION-
- 3.Urządzenie trzymaj tak aby końcówka była blisko skóry, przesuwaj powoli przez około 3 min.



Kojący masaż

Tryb pulsacyjny EMS (stosować z kremem ujędrniającym)

porów pores do masażu przez 3 minuty.

1. Twarz powinna być wilgotna.
2. Wybierz tryb EMS PULSE
3. Urządzenie trzymaj tak aby końcówka była blisko skóry, przesuwaj powoli przez około 3 min.



Ważne wskazówki:

Podczas korzystania z przyrządu należy umieścić boczny pasek czujnika jonów; trzymaj urządzenie przez cały czas w kontakcie ze skórą, aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji EMS i jonów.


Kąt powierzchni urządzenia powinien być obsługiwany, jak pokazano na rysunku (około 45 stopni).

Nie trzymaj głowicy urządzenia długo w tym samym punkcie, powoli ją przesuwaj.

Jeśli na twarzy występuje stan zapalny nie należy urządzenia stosować do czasu ustąpienia objawów.

Sugerowane użycie to 2-3 razy w tygodniu. Nie używaj go wiele razy dziennie.

Utrzymuj urządzenie w czystości.

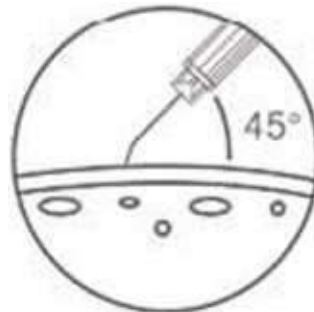

Czyszczenie i konserwacja

Nie czyścić urządzenia żrącymi substancjami

Możesz delikatnie przetrzeć urządzenie miękką wilgotną szmatką lub wacikiem bawełnianym.

Nie myć urządzenia bezpośrednio w wodzie.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas (około 3 miesięcy) należy je w pełni naładować aby uniknąć uszkodzenia baterii z powodu braku energii elektrycznej.



Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

