


INSTRUKCJA PRODUKTU TERMOMETR NA PODCZERWIEN

Konstrukcja produktu:

1. Wyświetlacz LED
2. Przycisk do włączenia termometru oraz wykonania pomiaru
3. Sensor
4. Pokrywka baterii
5. Przycisk wyboru trybu pracy
6. Przycisk zmiany
7. Przycisk zmiany

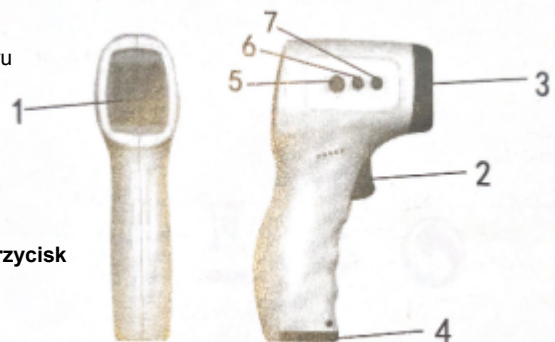

Wybór jednostki temperatury

By zmienić jednostkę temperatury należy przytrzymać przycisk Set (5) przez 3 sekundy następnie wcisnąć przycisk zmiany (6/7)

Wybór trybu pracy

By zmienić tryb pracy należy wcisnąć przycisk Set

!!!UWAGA Pomiaru temperatury dokonaj gdy urządzenie znajduje się w tej samej temperaturze w której wykonywany jest pomiar (minimum 30 minut) a osoba której wykonywany jest pomiar min 5 min. Upewnij się czy czujnik temperatury jest czysty. Termometr wyłącza się sam po upływie 30 sekund!!!

Dostosuj ostrzeżenie o maksymalnej temperaturze

W menu F2 Krótko naciśnij przyciski Góra/Dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć ostrzeżenie o maksymalnej temperaturze. (Domyślnie alarm maksymalnej temperatury jest ustawiony na 38 ° C. Możesz stopniowo zmniejszać do 37 ° C lub zwiększać do 39 ° C. Jeśli temperatura osiągnie określoną wartość, zostanie wyświetlony alert.

Sprawdź poprzednio zmierzoną temperaturę

Krótko naciśnij przycisk Góra/Dół, aby sprawdzić poprzednio zmierzoną temperaturę.

Przełączanie między temperaturą ciała a temperaturą obiektu

Krótko naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć się między temperaturą ciała (BODY) a temperaturą obiektu (SURFACE).

Włącz wyświetlacz przyciskiem spustowym, a następnie przystąp do pomiaru temperatury.

Opcja regulacji temperatury jest zalecana tylko wtedy, gdy jest to wymagane.

Nie zaleca się niepotrzebnej zmiany wartości, ponieważ może to wpłynąć na wartości pomiarowe.

Potwierdź, że tryb pomiaru nad ekranem to tryb temperatury ciała (BODY). Wyrównaj sondę termometru na czoło ze środkiem czoła i trzymaj ją pionowo, w odległości około 3-5 cm.

Naciśnij przycisk spustowy, aby rozpocząć pomiar. Po około 1 sekundzie na ekranie pojawi się wartość pomiaru.

UMIESZCZANIE BATERII:

Baterię należy umieszczać tak jak wskazano na urządzeniu, zasilane dwoma bateriami AAA.

IMPORTER:

NETBUY KACPER ŻEBROWSKI

ul. PRZEDBORSKA 49 97-500 RADOMSKO

TEL: +48786270507

Przycisk trybu	Menu	Funkcja	Przycisk w górę	Przycisk w dół
Długie naciśnięcie (z głównego menu)	F1	Zmień jednostkę temperatury (°C/°F)	Zmień na °C	Zmień na °F
Krótkie naciśnięcie (z F1)	F2	Dostosuj maksymalny alert temperatury	Zwiększ wartość	Zmniejsz wartość
Krótkie naciśnięcie (z F2)	F3	Dostosuj temperaturę	Zwiększ wartość	Zmniejsz wartość
Krótkie naciśnięcie (z F3)	F4	Dźwięk Wł./Wyl.	Włącz dźwięk	Wyłącz dźwięk