



Odmłodzenie i rozjaśnienie skóry:

Pomarańczowe światło uzupełnia energię komórkową, przyspiesza metabolizm skóry, poprawia witalność komórek, wygładza i rozświetla skórę.

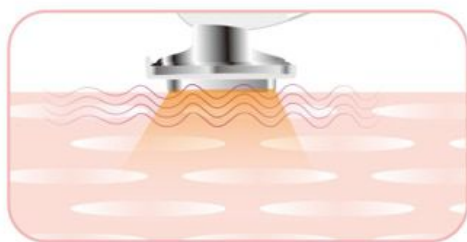


Odżywiają wprowadzenie:

Mikroelektryczne jony i ciepłe ciepło przyspieszają wprowadzanie esencji odżywczej, w połączeniu z kolorowym światłem i masażem wibracyjnym, dzięki czemu dno mięśnia w pełni wchłania esencję odżywczą, a skóra jest wilgotna i pulchna.

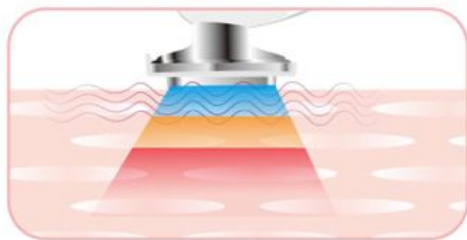


Mocne podnoszenie:

Masaż mikroprądowy EMS aktywizuje skórę, szybko poprawia jędrność i elastyczność skóry, utrzymuje ją w jak najlepszej kondycji przez długi czas, napina luźną skórę i w pełni przywraca jej najlepszą kondycję.

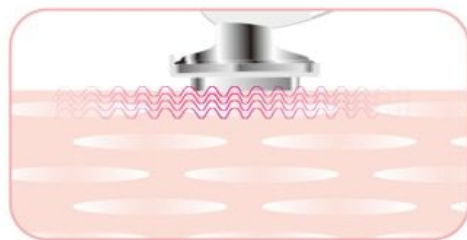

Opieka oka:


Ciepły masaż wibracyjny łagodzi zmęczenie oczu, w pełni wprowadza krem lub esencję pod oczy, wspomaga wchłanianie i zapewnia efekt upiększający oczy.

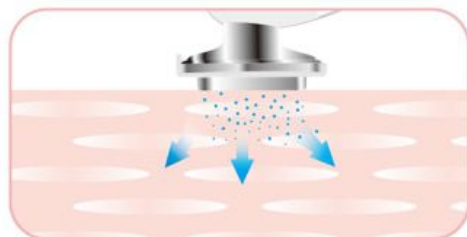

instrukcja obsługi



Symbol baterii zwykle wyświetla się na biało, ładuj w odpowiednim czasie, gdy wyświetla się na czerwono, będzie migać podczas ładowania, a symbol w pełni naładowanej baterii jest zawsze włączony.

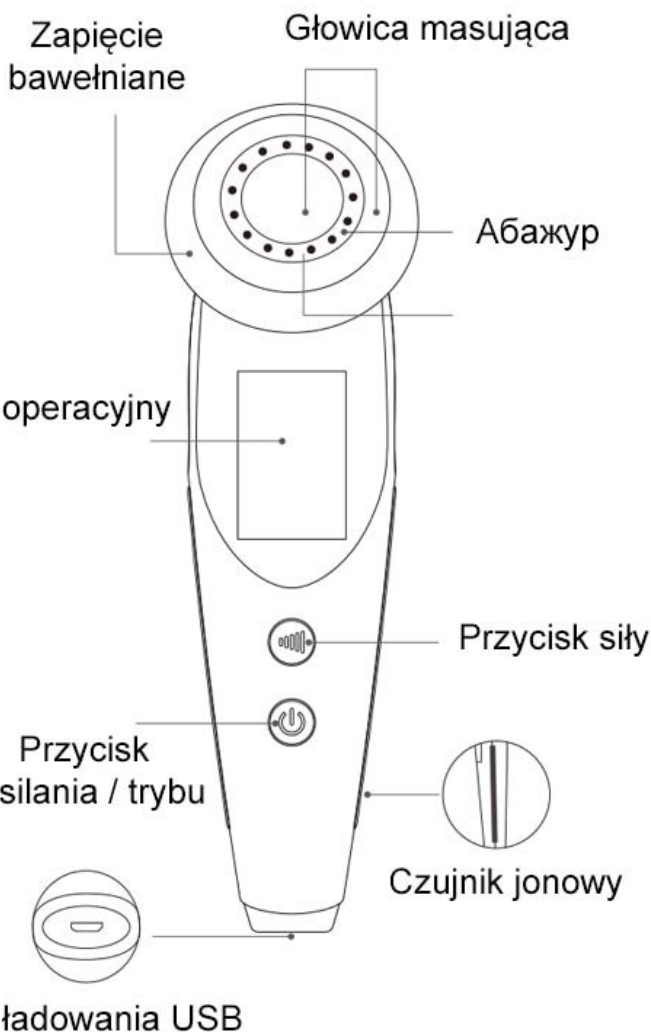



Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć




Trzymanie urządzenia kosmetycznego (pasek czujnika kontaktu)



Oczyść twarz okrężnymi ruchami

2/3/4. Naprawa śladów trądziku / odmładzający tryb rozjaśniający

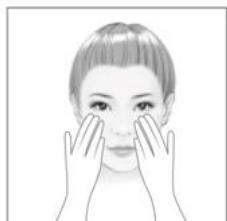

Nakładaj równomiernie na skórę tonik lub balsam do codziennego stosowania




Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć, a następnie wybierz odpowiedni tryb



Przytrzymaj przyrząd kosmetyczny, dotknij paska czujnika przyrządu dłonią i wyciągnij go od spodu twarzy

5. Tryb wprowadzenia odżywiania

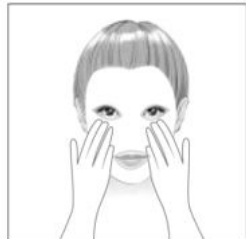


1. Nałóż maskę na twarz



2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć, a następnie wybierz tryb (Import pożywienia)(ES-SENCE-IN).




3. Przytrzymaj instrument, dotknij paska czujnika instrumentu ręką i pociągnij go od dołu do twarzy

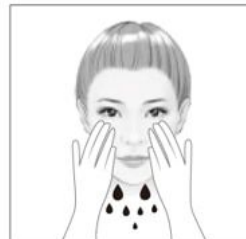

4. W zależności od rodzaju skóry, pozostałą esencję maski do twarzy spłukać wodą lub wmasować do wchłonięcia

6. Metoda liftingująca i ujędrniająca (do użycia z tonikiem / balsamem lub esencją)

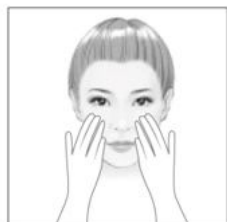

1. Nakładaj równomiernie na skórę tonik lub balsam do codziennego stosowania.



2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć i wybrać tryb (podnoszenia i dokręcania)



3. Przytrzymaj urządzenie kosmetyczne, dotknij paska czujnika urządzenia dłonią i podnieś go do twarzy

Opis produktu


Przyrząd kosmetyczny do odmładzania skóry to głęboko oczyszczający, odmładzający kolagen i napinający kontury twarzy. Ma jony dodatnie mikro-prądu EMS, jony ujemne mikro-prądu EMS, wibracje ultradźwiękowe, ogrzewanie skóry, światło czerwone, światło niebieskie, światło pomarańczowe i kolor. Przyrząd do pielęgnacji twarzy ze światłem i innymi funkcjami.

- * Mikroprąd EMS: na zasadzie przyciągania do siebie jonów dodatnich i ujemnych warstwa porów i brudu jest eksportowana, a po dokładnym oczyszczeniu składniki pielęgnacyjne wnikają w skórę poprzez jonoforezę;
- * Wibracje ultradźwiękowe: użycie wibracji o wysokiej częstotliwości i stymulacji mikroprądowej w celu zaostrzenia ludzkiej skóry, zwiększenia elastyczności skóry i poprawy metabolizmu komórek skóry;
- * Ciepły masaż sprzyja wchłanianiu, rozciąga teksturę skóry i nadaje jej jędrność;
- * Czerwone światło: Czerwone światło o długości fali 640nm-650nm przenika do skóry właściwej, sprzyja proliferacji kolagenu i elastyny, redukuje zmarszczki, przywraca witalność skóry, napina luźną skórę i wywołuje zmarszczki;
- * Niebieskie światło: Niebieskie światło o długości fali 415nm ma działanie szybko hamujące stany zapalne, może poprawić trądzik, jest odpowiednie dla skóry wrażliwej, tłustej i trądzikowej, redukuje bakterie w celu usunięcia trądziku, wspomaga syntezę białek i kolagenu oraz naprawia uszkodzoną skórę;
- * Pomarańczowe światło: 600nm pomarańczowe światło przenika przez skórę 1-2mm skutecznie leczy rumień skóry, łagodzi zaczerwienienia, zastępuje pigmenty, wspomaga odnowę warstwy rogowej naskórka i rozjaśnia skórę

Tryb pracy:


Dogłębne czyszczenie:

Ciepłe, aby otworzyć pory, wchłanianie jonów dodatnich i ujemnych oraz funkcja wibracji o wysokiej częstotliwości, aby oczyścić głęboką warstwę porów i poprawić matowość i pigmentację skóry.

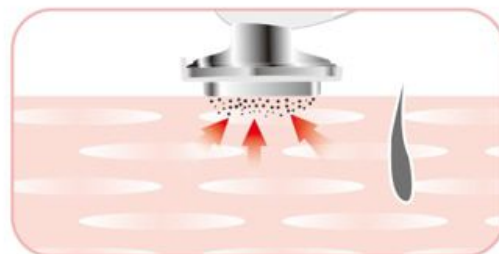


Rewitalizujący kolagen:

Czerwone światło wzmacnia aktywność komórek, wspomaga syntezę białek i kolagenu oraz działa z ciepłym i wibracyjnym masażem, aby zredukować drobne zmarszczki.

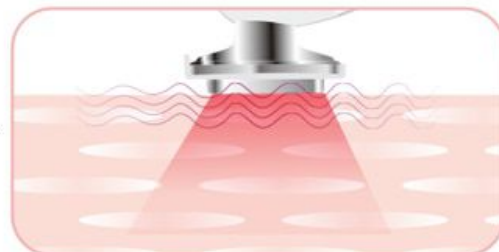


Naprawa śladów trądziku:

Redukcja bakterii trądzikowych przez niebieskie światło osiągnęła cel usunięcia trądziku. Skutecznie hamuje stany zapalne skóry i hamuje wydzielanie sebum, co poprawia problem rozszerzonych porów

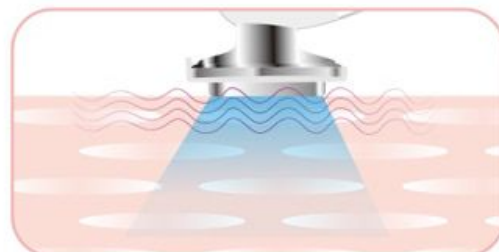

Oko

Za pomocą kremu pod oczy lub esencji do oczu użyj techniki wyciskania punktowego, masuj głowę od kącika oka do końca oka i delikatnie masuj punkt, pozostań przez 2 sekundy w każdym punkcie, aby złagodzić zmęczenie i promować wchłanianie

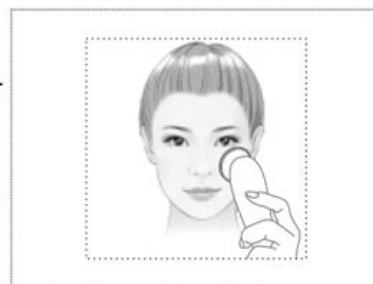


Wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry



rankiem

Czysta twarz
Nałóż toner
Wybierz, aby odmłodzić kolagen / naprawić ślady trądziku / odmłodzić i rozjaśnić skórę
Nałóż makijaż

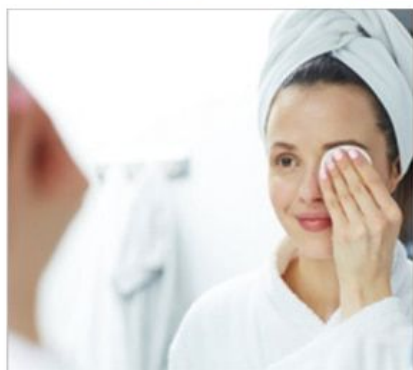

noc

Płyn do demakijażu
Czysta twarz
Głębokie czyszczenie (tryb głębokiego czyszczenia 2-3 razy w tygodniu)
Zastosuj tonik, esencję i balsam
Zastosuj maskę
Płyn kosmetyczny
Krem pod oczy lub esencja pod oczy

Środki ostrożności

1. Nie nadaje się do chirurgii plastycznej twarzy, podskórnej implantacji metalu, ciąży
2. Głowicę masującą wytrzeć ręcznikami papierowymi, nie myć wodą i nie dotykać metalu
3. Nie umieszczaj go w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka, aby uniknąć zwarcia
4. Pielęgnuj tylko twarz i szyję, unikaj trądziku, trądziku i czerwonych smug, przy wrażliwej skórze nie zaleca się codziennego stosowania, można go stosować raz w tygodniu.

Środki ostrożności podczas korzystania z wyposażenia kadłuba

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć, nie jest dostępny podczas ładowania.
2. Podczas używania palce trzymają paski czujnika po obu stronach ciała, tworząc pętlę z ludzkim ciałem.
3. Używaj go z płynem do demakijażu lub balsamem oczyszczającym podczas eksportu, nie używaj go ze środkiem do mycia twarzy / zmywaczem do makijażu;
4. Ten produkt wykorzystuje technologię jonów mikro-prądowych, niewielka indukcyjność prądu jest normalna, możesz mieć pewność, że ją użyjesz.

Parametry produktu:

Nazwa produktu	Oczyszczająco-odmładzający przyrząd kosmetyczny	Numer produktu	DRY-1005
Rozmiar produktu	165 * 50 * 54 mm	waga produktu	100g
Napięcie produktu	5 V / 1 A	moc znamionowa	4 w
pojemność baterii	750 mAh	Czas ładowania	Okolo 3 godzin
Bieg siłowy	3 biegi	Miejsce produkcji	Shenzhen, Chiny
Pakiet zawiera	Instrument kosmetyczny / podręcznik / Kabel do ładowania USB		

Instrukcje

1. Głębokie oczyszczanie, najpierw użyj instrumentu do czyszczenia eksportowego, a następnie użyj środka do mycia twarzy, aby oczyścić twarz (nie ma potrzeby dopasowywania urządzenia). (Uwaga: głębokie oczyszczanie doprowadzi brud z głębokich porów na powierzchnię skóry, a następnie użyj środka do mycia twarzy, aby oczyścić brud z powierzchni)
2. Po 5 minutach bezczynności przyrząd wyłączy się automatycznie
3. Podczas używania należy przytrzymać paski czujnika jonowego po obu stronach urządzenia i użyć głowicy instrumentu do dotknięcia skóry w celu utworzenia pętli. Należy utrzymywać wilgotność skóry podczas użytkowania, w przeciwnym razie przyrząd nie będzie działał normalnie.
4. Jeśli ma być używany na twarzy innych, musi skontaktować się z użytkownikiem, aby utworzyć pętlę, w przeciwnym razie instrument nie będzie działał normalnie
5. Nie nadużywaj

1. Jak używać w trybie głębokiego czyszczenia (należy używać z wacikiem)



Założ wacik



Założ wacik + karabińczyk



Wlej płyn do demakijażu

Konserwacja

Wymagana jest konserwacja, najpierw sprawdź, czy zasilanie jest wyłączone. Jeśli włączysz zasilanie, użyj mokrych ręczników i papierowych ręczników do konserwacji, może wystąpić podrażnienie.

Nie myj ciała

Instrument może działać nieprawidłowo, należy go przetrzeć szmatką lub miękką szmatką lekko zwilżoną mydłem.



Wyczyść wacik

Gdy pierścień mocujący jest zabrudzony, przepłucz go czystą wodą



Nie wycierać korpusu roztworami powodującymi korozję

Do wycierania nie używaj alkoholu, naturalnej wody, benzyny, płynu do demakijażu itp., Ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu, pękanie, odbarwienie itp.



7. Jak korzystać z pielęgnacji oczu (należy używać z kremem pod oczy lub esencją pod oczy)

1. Nałóż produkty do pielęgnacji skóry oczu (takie jak krem pod oczy, maska na oczy itp.)
Równomiernie wokół oczu



2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć, a następnie wybierz tryb (pielęgnacja oczu)




3. Przytrzymaj instrument, dotknij pasków wskaźnikowych po obu stronach przyrządu ręką, użyj techniki punktowego wyciskania, dociśnij głowę, aby wypełnić wewnętrzny kącik oka do końca oka i delikatnie masuj (Pielęgnacja oczu Mikroprąd EMS jest domyślnie wyłączony, możesz włączyć mikroprąd EMS samodzielnie, naciskając krótko przycisk intensywności w razie potrzeby)



Zalecane użycie


Broda

Umieść głowicę masującą na środku podbródka i użyj techniki łukowej ze skroni, aby masować ze stałą prędkością przez 2 sekundy

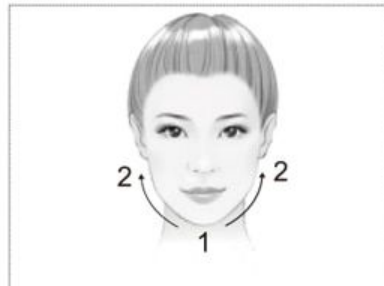

Linia międzyfazowa

Przenieś ciało do dolnych skroni i masuj kości policzkowe od dołu do góry ze stałą prędkością przez 2 sekundy

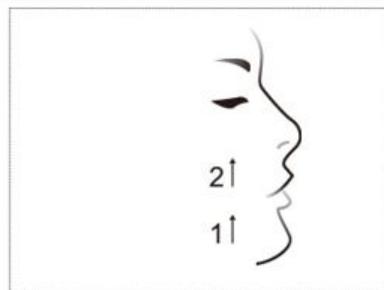


Policzki (ruch policzków podzielony jest na dwie części)

①



1. Umieść głowicę masującą w kąciach ust i masuj kości policzkowe techniką łuku ze stałą prędkością przez 2 sekundy

②

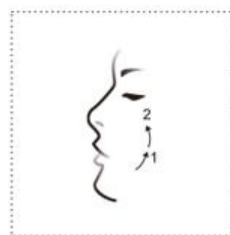

2. Umieść głowicę masującą obok kąciaka ust i użyj techniki w kształcie łuku, aby masować płatek ucha ze stałą prędkością przez 2 sekundy

przetwarzać naprzemiennie