


save[®]

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO SZCZOTECZKI

KROK 1

Przy pierwszym użyciu wyczerp całą baterie, następnie ładuj przez 6 godzin.

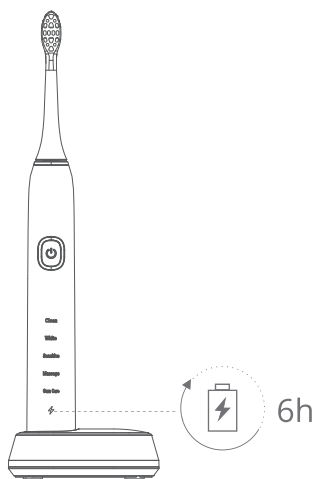


PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

11

KROK 2


Zamocuj wymienną końcówkę szczotkującą na urządzeniu sonicznym. Prawidłowy odstęp między końcówką, a urządzeniem wynosi 1-2mm.

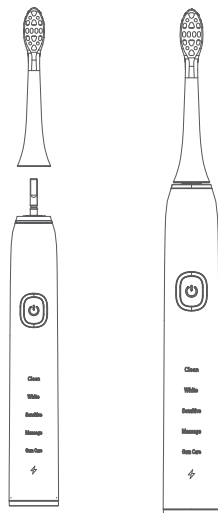

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

KROK 3

Wyciśnij pastę na szczoteczkę.

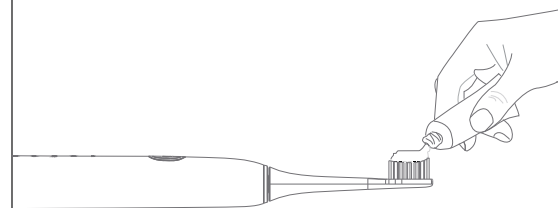


PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

13

KROK 4

Ułóż szczoteczkę między zębem, a dziąsłem.

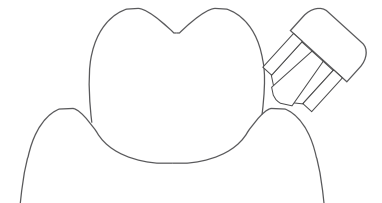


PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

14

KROK 5

Włącz urządzenie i zacznij czyścić zęby.

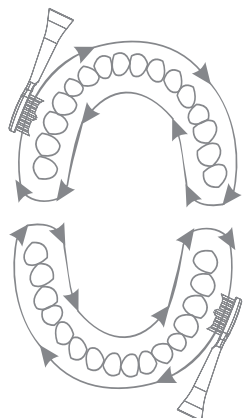


PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

15

KROK 6

Wyłącz urządzenie soniczne, a następnie ściągnij końcówkę do szczotkowania.

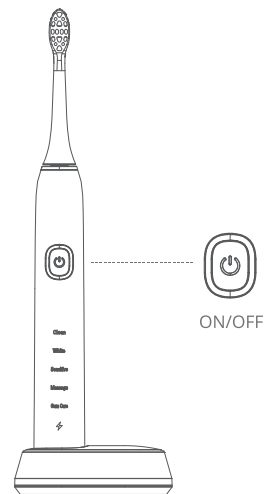


PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

16

KROK 7

Umyj urządzenie soniczne pod bieżącą wodą, a następnie wytrzyj nadmiar wody miękką szmatką.

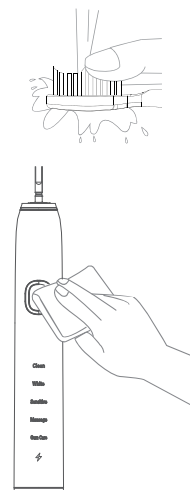


PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

17

KROK 8

Umieść urządzenie soniczne na stacji ładującej podłączonej do prądu.

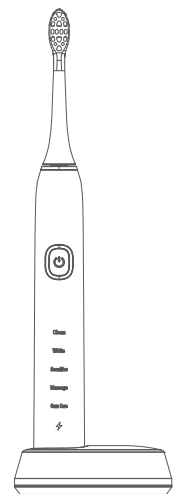

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

18

SZCZOTECZKA SONICZNA

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE

Głównym założeniem naszej marki jest maksymalne zadbanie jamy ustnej naszych klientów przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa. Zależy nam, aby nasi klienci chętnie sięgali po produkty marki Save. Dokładamy wszelkich starań, aby użytkownicy kształtowali zdrowe nawyki poprzez:

- * Inteligentny timer
- * Wodoodporność IPX7- bezpieczeństwo użytkownika,
- * Włosie końcówki szczotkującej DuPont-światowa marka, bazująca na surowcach najwyższej jakości
- * Przedłużona żywotność- pozwala na długotrwałe użytkowanie urządzenia

Wyżej wymienione funkcje sprawiają, że klient maksymalnie może zadbać o zdrowie swojej jamy ustnej, przy zachowaniu szczególnego bezpieczeństwa! Nasza szczoteczka soniczna jest skuteczna w usuwaniu osadu nazębnego, plam po herbacie, kawie, a także osadu po papierosach. Co poprawia stan zółkniętych zębów, skutecznie przyczynia się do ich wybielenia.

***Przyjazny dla środowiska**
Przykładamy szczególną uwagę aby nasze produkty były przyjazne dla środowiska.
Po rezygnacji z używania szczoteczki sonicznej Save, prosimy o przekazanie jej do punktu zbiórki surowców wtórnych. Należy zwrócić uwagę, iż w produkcji znajdują się bateria, którą należy wyjąć i oddać do specjalnego pojemnika. Można też poprosić o pomoc firmy poekspozycyjne, gdy nie wiemy jak wyjąć baterię, pomogą rozwiązać problem w sposób przyjazny dla środowiska.

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

01

* Niebezpieczeństwa

1. Nie umieszczaj stacji ładującej w wodzie ani innej cieczy. Jeśli stacja wpadła już do wody, wyłącz ją przed wyjęciem z wody. Upewnij się, że jest całkowicie sucha przed następnym użyciem.
2. Nie ładuj, nie używaj i nie przechowuj w pobliżu ognia i wysokiej temperatury.
3. Nie ładuj w pobliżu silnego pola magnetycznego.


* Ostrożność

1. Sprawdź, czy produkt napięciowy dostosowuje się do lokalnego napięcia przed jego naładowaniem.
2. Jeden zestaw zawiera elementy wymienne jak stacja dokująca do ładowania, uchwyt i przewód USB. Gdy jakaś część się zepsuje, wymień ją, aby uniknąć niebezpieczeństwa (wymiana elementów tylko na oryginalne od producenta). Oddaj urządzenie jeśli wymiana elementów nie wystarcza.
3. Nie umieszczaj produktu w miejscu dostępnym dla dzieci i niemowląt. Nie używaj go jako zabawki.
4. Zapytaj lekarza przed użyciem, jeśli masz operację w ciągu 2 miesięcy.
5. Nie stosuj w innych celach niż do pielęgnacji jamy ustnej.
6. Wyczyść główkę szczoteczki po użyciu, gdy twoja pasta do zębów jest z nadtlenkiem wodoru, dwuwęglanem i wodorowęglanem.
7. Nie używaj go podczas brania prysznicu. Wyłącz go, gdy nie jest używany, aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru.

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

02

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO SZCZOTECZKI

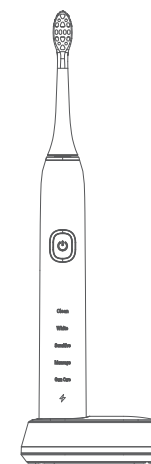

INSTRUKCJA OBSŁUGI

*Przy pierwszym użyciu podążaj za poniższymi wskazówkami:

1. Nie ładuj urządzenia sonicznego przed pierwszym użyciem. Użyj urządzenia w celu mycia jamy ustnej. Pamiętaj, aby nie dociskać za mocno końcówki szczotkującej do zębów oraz dziąseł, tak aby nie uszkodzić szkliwa.
2. Przed pierwszym ładowaniem urządzenie powinno być rozładowane.
3. Umieść stację ładującą w bezpiecznym, suchym i zacienionym miejscu.
4. Po uprzednim sprawdzeniu napięcia prądu w gniazdku wtykowym podłącz stację ładującą.
5. Umieść urządzenie soniczne w stacji ładującej. W celu sprawdzenia czy urządzenie ładuje się prawidłowo sprawdź czy pali się lampka kontrolna.

* Wskazówki


Pamiętaj aby dbać o środowisko. Nie wyrzucaj urządzenia do śmietnika domowego. Produkt zawiera baterię, dlatego wyrzuć urządzenie do pojemnika przeznaczony na produkty elektroniczne bądź oddaj do specjalnego punktu.

Certyfikaty: CE ROHS FCC CQC
Certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO-9001

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

03


SPECYFIKACJA

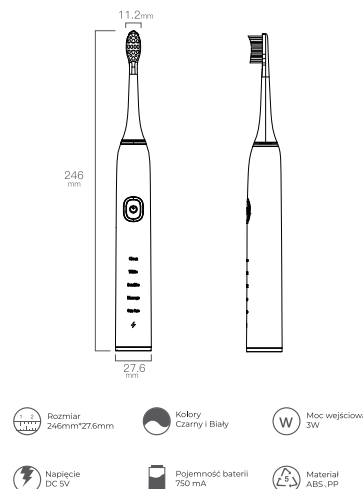

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

04

ZAWARTOŚĆ

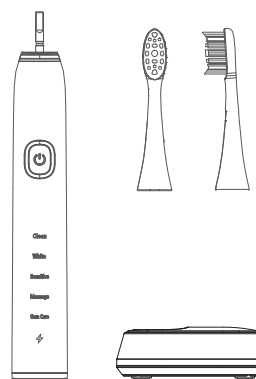

Rączka	Główki szczoteczki	Stacja ładująca	Etui podróżne
1	6	1	1

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

05

DIAGNOZA USTEREK

SYTUACJE	POWODY	ROZWIĄZANIA
Redukcja dźwięku.	Silniejszy nacisk na ząb. Zbyt mała odległość między uchwytem, a główką szczoteczki.	Umieść główkę szczoteczki lekko na zębie. Pozostaw odstęp pomiędzy główką szczoteczki, a uchwytem.
Krótka żywotność baterii po pełnym naładowaniu.	Brak energii podczas ładowania. Bateria słaba.	Umieść uchwyt prosto na stacji dokującej i upewnij się, że lampka kontrolna jest włączona.
Główki szczoteczek do zębów hamują.	Czas ładowania nie jest wystarczający. Nie używać przez 6 godzin.	Pozwól naładować się szczoteczce do końca. Najlepiej zostaw ją do ładowania na noc.

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

06

ŁADOWANIE BATERII

1. Wyczerp całą baterię przed pierwszym ładowaniem i każdym kolejnym.
2. Umieść stację ładującą w bezpiecznym, suchym i zacienionym miejscu.
3. Po uprzednim sprawdzeniu napięcia prądu w gniazdku wtykowym podłącz stację ładującą.
4. Umieść urządzenie soniczne na stacji ładującej. W celu sprawdzenia czy urządzenie ładuje się prawidłowo sprawdź czy pali się lampka kontrolna.

- * czerwone światło - ładowanie
- * zielone światło - bateria naładowana
- * żółte światło - niski poziom naładowania baterii

UWAGA


Po 6 miesiącach nieużywania ładuj urządzenie przez 20-24h.

- * Nie ładuj szczoteczki w łazience! Nie umieszczaj stacji dokującej obok wody.
- * Nie zrywaj produktów ani nie wymieniał baterii, w razie potrzeby zmień baterię, poproś o pomoc personel.
- * Nie zamieniaj kabla ładującego USB & stacji dokującej, wyślij ją do działu serwisu, jeśli jest taka potrzeba.

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

07

CODZIENNA KONSERWACJA URZĄDZENIA

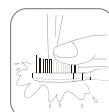


CZYSZCZENIE

- * wyczyść główkę szczoteczki po użyciu i wysusz ją powietrzem
- * nie ciągnij szczoteczki, aby uniknąć jej awarii



CZYSZCZENIE PODSTAWY

- * wyczyść podstawę miękką szmatką
- * nie wkładaj jej do wody
- * nie czyść jej w powyżej 40°C wody lub rozpuszczalnikiem kwasowym

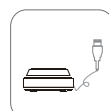

CZYSZCZENIE STACJI ŁADUJĄCEJ

- * wyczyść brud ze stacji ładującej,
- * wyłącz przed oczyszczeniem stacji ładującej, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym
- * przetrzyj stację miękką szmatką, aby uniknąć zwarcia



WYMIANA GŁOWICY SZCZOTECZKI

- * wymieniał główkę szczoteczki po 3 miesiącach użytkowania, jak sugerują dentyści

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

08

5 TRYBÓW


39 840 ruchów/min w połączeniu z szeroką główką szczoteczki do zębów zapewni głębokie i doskonale rezultaty czyszczenia.

OPIS FUNKCJI

1. 5 trybów: tryb mycia, tryb wybielający, tryb wrażliwy, tryb masujący, tryb pielęgnacji dziąseł.
2. każdy tryb ma 8 sekundowy timer
3. sekwencja przycisków funkcyjnych: tryb mycia > tryb wybielający > tryb wrażliwy > tryb masujący > tryb pielęgnacji dziąseł > stop

TRYBY


W dowolnym trybie zatrzymaj się na 0,3 s, aby przypomnieć o konieczności wyszczotkowania następnego obszaru. Całkowity czas szczotkowania wyniesie 2 minuty.

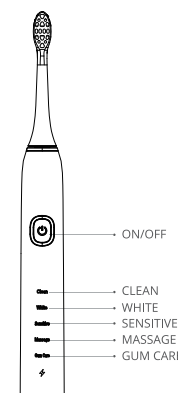

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

09

CZAS

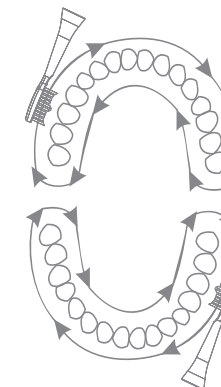

- * Szczotkowanie zębów przez 2 minuty, zgodnie z zaleceniami dentystry.
- * Urządzenie przypomina użytkownikowi o zmianie obszaru szczotkowania co 30 sekund.
- * Urządzenie zapamiętuje tryb po każdym użyciu.

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE

10