

Szczoteczka Soniczna Save SN-700

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZEJ MARKI SAVE

Zawsze staramy się, aby każdy konsument mógł w prosty sposób cieszyć się wysoką jakością pielęgnacji jamy ustnej. Doświadczenie! Skutecznie czyszcisz uporczywe przebarwienia zębów, takie jak płytka nazębna i plamy z tytoniu, plamy z herbaty, plamy z kawy itp. Zapobiega zapaleniu dziąseł, łagodzi zaczerwienione i opuchnięte dziąsła oraz poprawia higienę jamy ustnej pacjentów ortodontycznych. Dla wygody użytkownika, prosimy o szczególne zapoznanie się z instrukcją użytkownika tego produktu.

Bardzo dziękujemy za wybranie naszego produktu. Koncentrujemy się na rozwoju produktów związanych z higieną osobistą zębów nie tylko po to, aby tworzyć dobre i designerskie produkty. To, co naprawdę chcemy zrobić, to odpowiednio kształtować nawyki konsumentów wobec zębów i pielęgnacji jamy ustnej. Dzięki naszym wysiłkom, Ty i Twoja rodzina unikniecie problemów stomatologicznych!

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTROŻNIE

1. Nie zanurzaj ani nie umieszczaj kabla ładującego w wodzie lub jakimkolwiek płynie. Jeśli okaże się, że kabel do ładowania wpadł do wody, należy natychmiast odłączyć wtyczkę. Nie wyciągaj ręk, aby wyjąć kabel ładujący, który wpadł do wody. Po wyczyszczeniu upewnij się, że kabel ładujący jest gotowy do użycia. Po całkowitym wyschnięciu włóż ponownie zasilanie.
2. Ten produkt zawiera wbudowany akumulator, nie wrzucaj go do ognia, nie ładuj, nie używaj ani nie umieszczaj w miejscach o wysokiej temperaturze.
3. Podczas ładowania produktu należy trzymać się z dala od silnego pola elektromagnetycznego.

Ostrzeżenie

1. Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić, czy lokalne napięcie zasilania jest zgodne z napięciem oznaczonym na produkcie.
2. Ten produkt zawiera części, które nie mogą być naprawiane przez użytkownika (takie jak: kabel do ładowania, uchwył szczoteczki do zębów, przewód itp.).
- Jeśli jakikolwiek produkt jest uszkodzony, należy wymienić akcesoria odpowiedniego modelu na czas, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Urządzenie należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt; nie może być ono używane jako zabawka.
- Jeśli w ciągu dwóch miesięcy przeprowadzono operację jamy ustnej lub dziąseł, należy skonsultować się z dentystą przed użyciem tego produktu medycznego.
- Ten produkt nadaje się wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka, nie należy go używać do innych celów.
- Jeśli pasta do zębów zawiera nadciśnienie wodoru, sodę oczyszczoną lub wodorowęglan, po użyciu należy dokładnie umyć główkę szczoteczki wodą.
- Nie używaj tego produktu w kąpielach lub wannie. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę zasilania, aby uniknąć pożaru lub niebezpieczeństwa.

ŁADOWANIE

1. Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania i gniazdo zasilania są bezpieczne i dostosowane do napięcia.
2. Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania w bezpiecznych warunkach należy upewnić się, że kabel ładowania jest suchy, a narożniki gniazda zasilania są czyste.

Szczoteczka Soniczna Save SN-700

3. Przed pierwszym użyciem należy włączyć szczoteczke elektryczną. W przypadku niskiego poziomu zasilania lub braku zasilania szczoteczki, należy ją naładować. Po uruchomieniu, należy podłączyć szczoteczke do podłączonego źródła zasilania w celu naładowania, a szczoteczka przestanie wibrować i przejdzie w tryb ładowania.

Informacja

1. Specjalnie dla Ciebie zaprojektowaliśmy wskaźnik naładowania baterii. Podczas użytkowania należy zwracać uwagę na stan wskaźnika baterii. Naładuj go na czas, gdy bateria jest słaba.
2. Jeśli szczoteczka elektryczna nie była używana przez dłuższy czas, przed ponownym użyciem należy ją najpierw naładować. Zapewnia to bezpieczne i prawidłowe ładowanie, co przyczynia się do wydłużenia żywotności produktu.

Nie należy wyrzucać produktu przypadkowo po zakończeniu okresu użytkowania. Wbudowany akumulator może zawierać składniki szkodliwe dla środowiska. Produkt należy utylizować w miejscu przeznaczonym do utylizacji akumulatorów w danym regionie i upewnić się, że wewnętrzna moc akumulatora została wyczerpana.


Producent

KSMG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bocheńska Ba/2
61-324 Poznań
e-mail: biuro@ksmg.pl
mob. +48 731 241 541

Szczoteczka Soniczna Save SN-700

OPIS DZIAŁANIA FUNKCJI

1. Przełączanie trybu: dotknij przycisku, aby włączyć i wejść do interfejsu rozruchowego. Krótko naciśnij przycisk wyboru funkcji trybu, aby przejść do wyboru trybu. (Naciśnij krótko przycisk przełącznika, aby przejść do tego trybu pracy)
2. Sekwencyjny tryb działania: Podczas pracy szczoteczki naciśnij krótko przycisk wyboru funkcji trybu, aby cyklicznie przełączać tryby funkcji (Cool Clean—Sensitive and Soothing—Deep Cleaning—Whitening and Polishing—Comfortable Massage—DIY—setting).

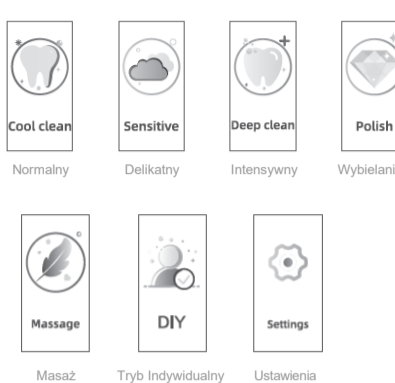


Normalny Delikatny Intensywny Wybielanie

Masaż Tryb Indywidualny Ustawienia


3. Włączanie i wyłączanie

1. Dotknij obszaru spustu po obu stronach, elektryczna szczoteczka do zębów zaświeci się i przejdzie do ekranu startowego, naciśnij krótko przycisk przełącznika w ciągu 8 sekund, aby przejść do stanu testu trybu pracy, gdy była wyłęczona po raz ostatni, i automatycznie przejdzie do stanu wyłączenia, jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja w ciągu 8 sekund.
2. Krótko naciśnij przycisk zasilania lub przycisk trybu funkcji, elektryczna szczoteczka do zębów zaświeci się i przejdzie do ekranu uruchamiania, krótko naciśnij przycisk trybu, aby pracować w trybie ostatniego wyłączenia, krótko naciśnij przycisk przełącznika, elektryczna szczoteczka do zębów wejdzie w ten tryb, naciśnij kilkakrotnie przycisk przełącznika, elektryczna szczoteczka do zębów pojawi się 8 sekund po ekranie wyłączenia, ekran przejdzie do stanu wyłączenia.

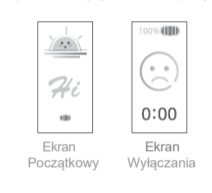

Szczoteczka Soniczna Save SN-700

4. Ustawianie funkcji: Po wejściu do interfejsu ustawień naciśnij przycisk potwierdzenia, a następnie naciśnij przycisk wyboru trybu, aby przejść do ustawień funkcji systemu. W tym momencie można ustawić język systemu, przywrócić ustawienia fabryczne i inne ustawienia funkcji. Ustawienie języka: Ten produkt obsługuje dwujęzyczne przełączanie między językiem polskim i angielskim. Wybór języka interfejsu ustawień: Przywracanie ustawień fabrycznych: Interfejs ustawień - interfejs przywracania ustawień fabrycznych do przywrócenia.





SPECYFIKACJA I INFORMACJE O PRODUKCIE

Nazwa	Szczoteczka Soniczna Save
Model	SN-700
Kolor	Biała/Czarna
Urządzenie	
Napięcie znamionowe	3.7V = 2W
Czas działania	Około 2 godziny (Tryb Intensywny)
Standard	GB4706.1-2005, GB4706.59-2008
Czystość	36000RPM/min
Bateria	Litium
Czas ładowania	około 3 godziny
Wymiary	
	27.5 x 24.5 mm
Zawartość zestawu	
Szczoteczka	1
Kabel ładujący	1
Wymienne rączki	2
Instrukcja obsługi	1

Uwaga: Jeśli ten produkt zostanie zmieniony, należy zwrócić uwagę na oficjalne informacje bez wcześniejszego powiadomienia.

Szczoteczka Soniczna Save SN-700

5. Inteligentne przypomnienie o szczotkowaniu, automatyczne wyłączenie po 2 minutach; W stanie roboczym następuje 0.5-sekundowe krótkie zatrzymanie co 30 sekund, przypominające o zmianie obszaru szczotkowania.
6. Funkcja automatycznego zapamiętywania, po uruchomieniu będzie to poprzedni tryb pamięci wyłączenia.

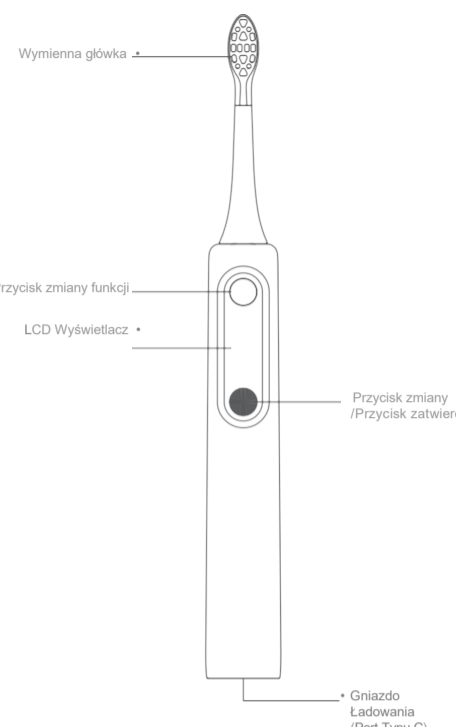01

02


03

04

05

Szczoteczka Soniczna Save SN-700


CZAS SZCZOTKOWANIA

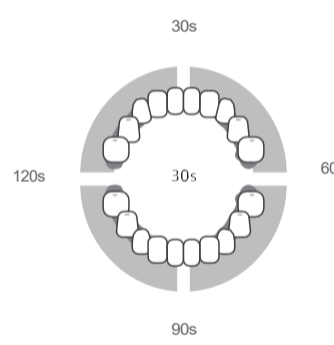

- Polskie towarzystwo stomatologiczne zaleca, aby za każdym razem myć zęby przez 2 minuty.
- Podczas użytkowania szczoteczka wibruje co 30 sekund, aby przypomnieć użytkownikowi o zmianie strefy szczotkowania zębów, co zapewnia naukowy efekt czyszczenia.
- Po każdym użyciu szczoteczka do zębów zapamięta wybrany tryb, a po następnym włączeniu rozpocznie wykonywanie zapamiętanego wzoru.


SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ▶

Krok 1: Przed pierwszym użyciem szczoteczki do zębów należy ją uruchomić. Jeśli pozostała bateria, należy ją zużyć i naładować. Akumulator można ładować w miarę jego używania, ale zaleca się również jego całkowite rozładowanie raz w miesiącu w celu wydłużenia żywotności akumulatora litowego.




Szczoteczka Soniczna Save SN-700


Krok 2: Zamontuj mocno główkę szczoteczki na trzonku główki szczoteczki. Między główką szczoteczki a uchwytem należy zachować odstęp około 1 mm, aby uniknąć rezonansu, który wpływa na wrażenia podczas szczotkowania.

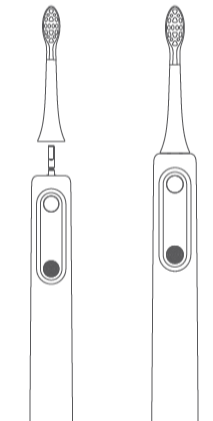

Krok 3: Wyciśnij odpowiednią ilość pasty do zębów na główkę szczoteczki.

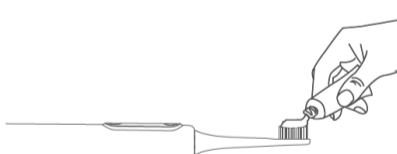


Krok 4: Umieść szczoteczke delikatnie na styku zębów i dziąseł.

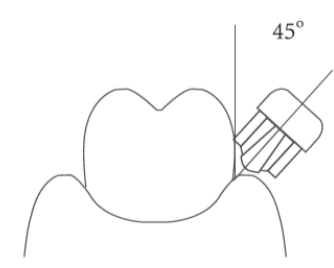


Szczoteczka Soniczna Save SN-700


Krok 5: Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć czyszczenie zębów i wyczyścić wszystkie części szczki.

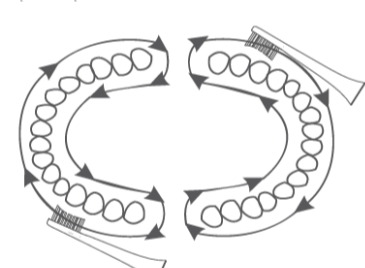

Krok 6: Aby zapobiec rozpryskiwaniu się piany pasty do zębów, należy wyłączyć szczoteczke przed wycięciem jej z ust.

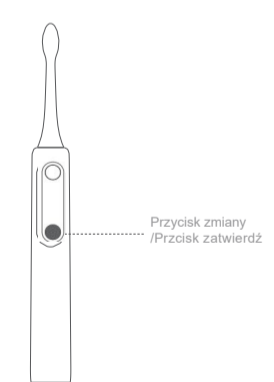


Krok 7: Po umyciu zębów oplucz główkę szczoteczki pod bieżącą wodą, strząśnij wodę z główki szczoteczki i wytrzyj uchwył do czysta.

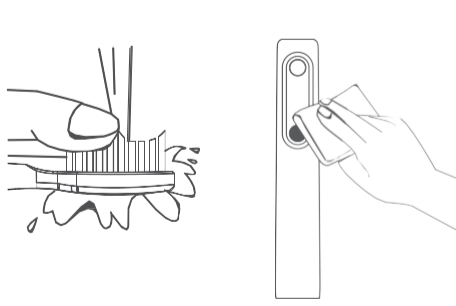

Szczoteczka Soniczna Save SN-700

Krok 8: Umieść szczoteczke elektryczną pionowo na suchym stole, pamiętając o założeniu osłony przeciwpływowej na główkę szczoteczki.



Przechowywanie

1. Jeśli elektryczna szczoteczka do zębów nie będzie używana przez dłuższy czas, należy odłączyć ładowarkę od gniazda elektrycznego, wyciągnąć ją i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
2. Szczoteczka elektryczna jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach i może być przechowywana w wentylowanym i suchym miejscu w temperaturze 0-35 stopni Celsjusza.
3. Regularnie czyść wtyczkę kabla ładującego, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i brudu oraz zmniejszeniu efektu izolacji, co może prowadzić do przegrzania lub porażenia prądem, powodując niepotrzebne straty.
4. Nie umieszczaj metalowych przedmiotów, takich jak monety lub spinacze biurowe, w pobliżu szczoteczki do zębów.
5. Jeśli szczoteczka nie jest używana przez dłuższy czas (zaleca się ładowanie przez ponad 12 godzin), należy odłączyć zasilanie, aby uniknąć pożaru lub niebezpieczeństwa.
6. Ten produkt zawiera baterie litowe. Należy je przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła. Nie ładować, nie transportować, nie używać i nie umieszczać w środowisku o wysokiej temperaturze.
7. Jeśli pasta do zębów zawiera nadciśnienie wodoru, sodę oczyszczoną lub węgiel (pasta wybielająca), po umyciu zębów należy dokładnie wyczyścić ją wodą i umieścić w chłodnym i suchym miejscu.

06

07

08

09

Szczoteczka Soniczna Save SN-700

Instrukcja Obsługi